

Andador KY9144T(KC)

Manual de uso y cuidado



MedicalTec

2025

Contenido

I. Notas y ámbito de aplicación	2
II. Instrucciones de uso	3
III. Estructura y Especificaciones del Producto	5
IV. Mantenimiento y solución de problemas	6

I. Notas y Ámbito de Aplicación

Este andador con ruedas (Modelo KY9144T(KC)) está diseñado para asistir en la deambulaci3n y ofrecer un punto de descanso. Los usuarios pueden emplearlo tambi3n para transportar art3culos.

La capacidad m3xima de carga de este andador es de 100 kg; no se debe exceder este l3mite para evitar daos o deformaciones. La capacidad m3xima de carga del estante para cestas de compras es de 10 kg.

Este andador es adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores. El peso neto del producto es de 8,5 kg.

Tenga en cuenta lo siguiente durante su uso:

1.1 Evite que los ni os utilicen este andador sin la supervisi3n de un adulto.

1.2 Para permitir el movimiento, aseg3rese de soltar el dispositivo de freno del manillar.

1.3 Se recomienda realizar una inspecci3n de la funci3n estructural y de seguridad cada tres meses con un uso normal, prestando especial atenci3n al apriete de los tornillos.

1.4 Este producto no generar3 residuos peligrosos. Sin embargo, las piezas daadas o de repuesto que se reemplacen deben ser entregadas a un centro de reciclaje de residuos para su correcto tratamiento.

1.5 Para la seguridad, queda prohibido utilizar el andador para transportar ni os. Al desplazarse, aseg3rese de que el andador se encuentre en una superficie estable para evitar que se incline o se caiga.

1.6 No modifique ni desmonte este producto sin el consentimiento expreso del personal t3cnico autorizado.

1.7 Accione el freno de estacionamiento al detener el uso o al dejar el andador sin vigilancia. Estacione en un lugar de bajo tr3fico para prevenir accidentes por colisi3n.

1.8 Preste atenci3n al estado de la superficie de la carretera durante la conducci3n. No exceda la velocidad para evitar accidentes.

1.9 Al conducir el andador, mantenga una velocidad reducida, no superior a 1,5 metros por segundo ($V \leq 1,5 \text{ m/s}$), y evite frenar de manera repentina.

△ 1.10 Advertencia (al sentarse): No se siente en el andador si est3 en estado plegado o en una posici3n inestable. Aseg3rese de que el andador no se doble mientras est3 sentado.

II. Instrucciones de uso

Gráfico 1



Gráfico 2

Muestra el estado plegado: levante primero la cesta del asiento y luego tire de la cuerda para plegar el andador.

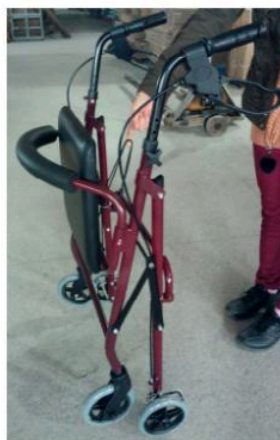


Gráfico 3

Diagrama de postura correcta para sentarse a descansar.

Por su seguridad, asegúrese de presionar la manija hacia abajo para accionar el freno.



Gráfico 4

Diagrama de extracción del soporte lumbar:

Sujete simultáneamente las dos protuberancias (cuentas) y luego tire hacia arriba del tubo trasero. Desenrosque la perilla y retire el tornillo para ajustar el manillar a la altura deseada.



Gráfico 5

Diagrama de ajuste manual:

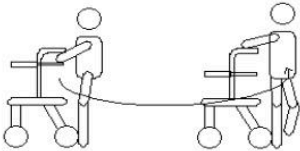
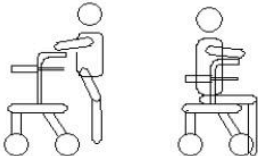
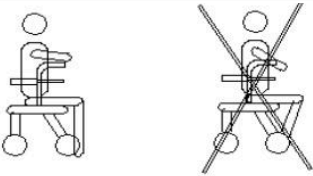
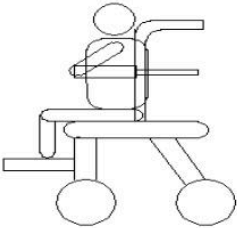
	1. Utilice el asa para estabilizar su cuerpo y gire la cabeza con cuidado.
	2. Coloca las manos en el manillar y siéntate hacia atrás lentamente para bajar tu peso. ¡ importante ! Asegúrate de que tus piernas toquen el asiento antes de sentarte.
	3. Observaciones cautelares. El freno de estacionamiento debía estar accionado antes de sentarse. Asegúrate de mantener la postura correcta.
	4. Peso: 100 kg (incluida una carga máxima de 10 kg para la cesta de la compra).

Diagrama de Montaje (Estructura de Ensamblaje): Ensamble de acuerdo con el siguiente diagrama.

1. El balancín de la rueda delantera se inserta en el bastidor delantero; la perilla se aprieta en la posición del orificio de instalación y luego se fija con el pasador (como se muestra en la Figura 7).
2. Una vez instalado el componente de polea del tubo de la pierna inferior, el brazo de freno se inserta en el tubo trasero y se alinea con el orificio de instalación. Luego, al girar la perilla para bloquear, el pasador queda fijo (como se muestra en la Figura 8).



Figura 7



Figura 8

Inserte el tubo del mango en el soporte del marco frontal (ajuste a una altura adecuada), alinéelo con la posición del orificio y fíjelo con los tornillos y perillas de cabeza hexagonal (como se muestra en la Figura 9).



Figura 9

Método de Instalación de la Estructura del Respaldo Abatible: Alinee el soporte del marco del respaldo con el orificio de la pieza de plástico situada encima del marco, presione la canica e insértelo (como se muestra en la Figura 10).



Figura 10

III. Estructura y Especificaciones del Producto

Estructura: Fabricada en acero laminado en frío y soldada. Tras un doble tratamiento de fosfatado, se aplica un recubrimiento electrostático que le proporciona una excelente resistencia al envejecimiento y asegura el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad. La capacidad de carga máxima es de 100 kg (incluyendo la carga máxima de 10 kg para la cesta de compras).

Especificaciones de la Tubería: Los bastidores delantero y trasero están compuestos por tubos redondos soldados, con un diámetro exterior de 22 mm y un espesor de pared de 1,2 mm. El manillar, por su parte, utiliza tubos redondos con un diámetro exterior de 19 mm y un espesor de pared de 1,2 mm.

Ruedas Giratorias: Las ruedas delanteras son de PVC de 6 pulgadas, duraderas y de alta calidad. Las ruedas traseras incluyen frenos. Estas ruedas garantizan un buen contacto con el suelo, excelente estabilidad y un alto coeficiente de fricción superficial para un uso más seguro.

Empuñadura: Fabricada en espuma plástica de alta densidad para proporcionar un agarre antideslizante y cómodo. El sistema de freno incorpora un mecanismo de autobloqueo que garantiza un funcionamiento sencillo y seguro.

Respaldo: Incorpora una estructura de respaldo fijada con pasadores de resorte desmontables. (Nota: La descripción original en chino de la estructura de fijación del respaldo estaba incompleta. Esta traducción se basa en diseños de producto habituales para mayor claridad. Ajústela si el método de fijación real difiere).

IV. Mantenimiento y Solución de Problemas

(I) Mantenimiento

Se debe realizar una inspección periódica de todos los componentes para verificar la ausencia de desgaste o daños, asegurando la seguridad del equipo.

Las piezas desgastadas o dañadas deben ser reemplazadas o reparadas inmediatamente antes de la siguiente utilización.

Mantenga el equipo limpio. Se puede utilizar un líquido limpiador o jabón para vajilla para su limpieza.

(II) Solución de Problemas

Problema	Causa	Medida Correctiva	Comentarios
Inmovilidad	Frenado activado/brusco	Accionar el freno de pie (Desactivar freno)	Usuario
Dificultad para ajustar/levantar el manillar	Interferencia por residuos / Perilla M6 floja	Eliminar residuos / Apretar perilla de ajuste	Usuario



MedicalTec

todos los derechos reservados.