

Manual Silla de Ruedas Eléctrica Stand Up *Premium

Manual de uso y cuidado



MedicalTec

2023

Introducción al producto

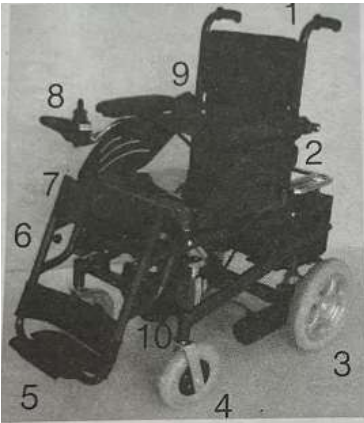


Ilustración 1


- | | | | |
|---|-----------------|----|------------------------|
| 1 | Mango | 6 | Soporte de rodilla |
| 2 | Reposabrazos | 7 | Cinturón de rodilla |
| 3 | Rueda trasera | 8 | Controlador |
| 4 | Rueda delantera | 9 | Cinturón de pecho |
| 5 | Reposapiés | 10 | Lámpara de iluminación |

La silla de ruedas eléctrica es fácil de usar. El usuario puede hacer que la silla de ruedas eléctrica se mueva hacia adelante, hacia atrás o gire y gire en el mismo lugar solo con el controlador. Además, los usuarios pueden estar de pie con la silla de ruedas cuando lo deseen. Cuando la potencia no es suficiente, se puede utilizar como silla de ruedas de tránsito.

Accesorios: Cargador 1 pc, baterías de almacenamiento 2 compra.

1. Instalación y uso

1. Instalación del armazón de la silla 6 Suelte la tuerca bloqueada, puede separar el marco del respaldo, será conveniente para el embalaje. (Ver ilustración 2)
2. Ajuste la perilla A, puede ajustar la altura del soporte para las rodillas. (Ver ilustración 3)
3. Suelte la perilla B, puede colocar el soporte para las rodillas adentro. También es conveniente para el embalaje. (Ver ilustración 3)

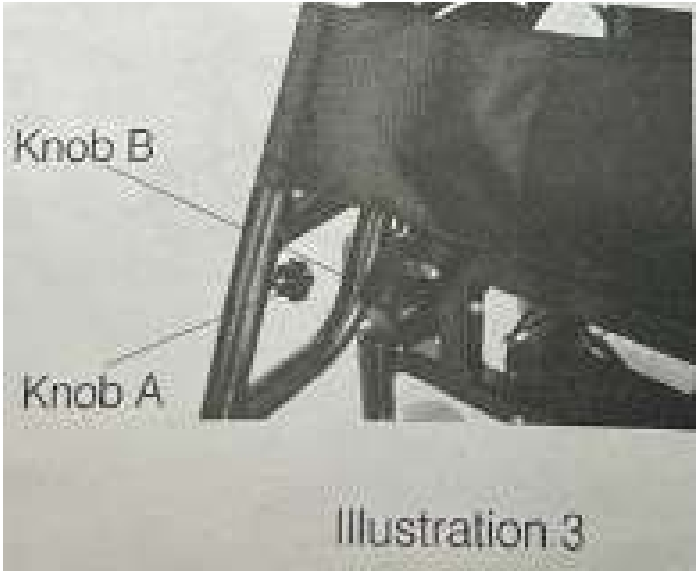

1. Dimensión exterior	1150 (L) x630 (wx1050 (H) mm	10. Sobre el obstáculo	40mm
2. Luces	24V 10w	11. Distancia de parada	1 m
3. Pero Neto incluyendo baterías	65kg	12. Distancia de carrera por carga	25km
4. Capacidades	Max: 100kg	13. Ruido	65dBA
5. Diametro de la rueda	200 mm (8)	14. Especificaciones de potencia	2x12V=24V, 38Ah
6. Rueda Motriz	330mm (12,5)	15. Superar el canal	¡100 mm
7. Ancho del asiento	440(L) x 440(W) mm	16. Especificaciones del motor	168Wx2
8. Velocidad	0-7Km/h	17. Corriente de carga	3.5A
9. Capacidad progresiva	12¡	17. Entrada de carga	CA 220V

2. Instalación de la batería

Cuando las baterías necesiten cambiarse, coloque dos baterías de almacenamiento nuevas en la misma dirección en la caja de baterías. Conecte el ánodo de la batería A y el cátodo de la batería B con un cable corto. Conecte el ánodo de B run con el cable corto rojo y el cátodo de la batería A con el cable corto azul. Luego cubra la caja de la batería.

3. Valores dobles

La silla de ruedas eléctrica de pie Fs129 tiene un cinturón de seguridad de pecho y rodilla. Ambos son de doble seguridad. Sugerimos que los usuarios usen el cinturón de seguridad siempre que quieran estar de pie. (Véase la ilustración 5)

4. Ajustes del reposabrazos

- 8 Perilla ajustable para controlar el reposabrazos abatible.
 - 9 Botón de encendido/apagado para la luz luminosa de la silla de ruedas.
 - 10 Ajuste la perilla 3 para desmontar o instalar el aparador.
- (Véase la ilustración 4)

5. Instalación del controlador

- 1) Inserte el soporte del controlador en la cubierta de fijación del controlador al lado del reposabrazos, ajuste la posición del controlador y sujete la tuerca de tornillo.



Illustration 4



Illustration 5

2) Conecte el conector etiquetado IZQUIERDA del controlador con el izquierdo del motor.

Conecte el conector etiquetado DERECHA del controlador con el derecho del motor. (Véase la ilustración 6)

3) Utilice las citas de velcro que vienen en la estructura de la silla, que sirven de guía y sujeción para el cable que va a la batería.

6. Funcionamiento de la silla de ruedas eléctricas

1) Encienda el interruptor de la fuente de alimentación

V/O. entonces la luz indicadora de encendido está encendida. Cuando la primera luz indicadora de volumen de potencia a la derecha está encendida, significa que la potencia es suficiente.



2) La velocidad de conducción se puede ajustar mediante el botón de ajuste de velocidad en el controlador. La baja velocidad de arranque es adecuada

3) Sostenga el joystick para comenzar lentamente. Empuje el joystick hacia adelante, la silla de ruedas se mueve hacia adelante; mover el joystick hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda; Mueva el joystick hacia la derecha, se mueve hacia la derecha, mueva el joystick hacia atrás, se mueve hacia atrás.

4) Presione el botón de trompeta para hacer la alarma.

5) Presione el botón del interruptor de pie, luego las dos luces indicadas brillarán, empuje el joystick hacia adelante o hacia atrás, puede ponerse de pie o sentarse con la silla de ruedas (véase ilustración 8)

6) Presione nuevamente cuando las dos luces se aplasten, el joystick volverá al estado de conducción.

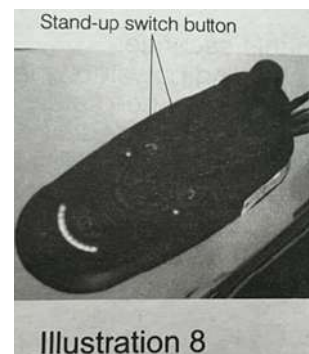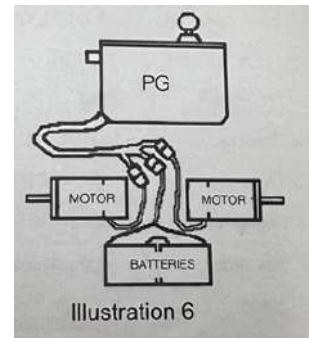

7. Asistente Push By

Cuando la potencia no es suficiente, mueva el interruptor del embrague, la silla de ruedas suelte el freno, puede ser empujado por el asistente. (Véase la ilustración 7)

8. Carga

1) Cargue la batería con el cargador especificado que viene con la silla de ruedas eléctrica por seguridad. Cargue su silla de ruedas cuando las luces indicadas acaban de dejar las últimas tres luces verdes en el controlador.

2) Enchufe la toma de corriente del cargador en la fuente de alimentación adecuada,

3) Cuando la luz roja encendida significa que recibe la fuente de alimentación y la luz amarilla encendida significa que las baterías se están cargando.

4) Si las baterías se habían cargado lo suficiente, la luz verde encendida.

(El tiempo de carga depende de cuánta energía quede en la batería. Una nueva batería de almacenamiento necesita cargarse de 12 a 14 horas por primera vez).

9. Movimiento lento o lento

Si el carretero battery conaval a toda velocidad o no responde rápidamente

Inough, pero la condición de la batería es buena, cheok la configuración de velocidad máxima. Finalizar el ajuste de velocidad no resuelve el problema, entonces puede haber una falla no peligrosa.

Póngase en contacto con su agente de servicio

10. Bloqueo/desbloqueo de la silla de ruedas

El sistema de control VR 2 se puede bloquear para evitar el uso no autorizado. El método de bloqueo. a través de una secuencia de pulsaciones de teclas y movimientos de joystick, que se detallan a continuación.

Para bloquear la silla de ruedas

- Mientras el sistema de control está encendido, mantenga presionado el botón de encendido / apagado.
- Después de 1 segundo, el sistema de control emitirá un pitido. Ahora suelte el botón de encendido / apagado.
- Desvíe el joystick hacia adelante hasta que el sistema de control emita un pitido.
- Desvíe el joystick en reversa hasta que el sistema de control emita un pitido.
- Suelte el joystick, habrá un pitido largo.
- La silla de ruedas ahora está bloqueada

Para desbloquear la silla de ruedas

- Utilice el botón de encendido/apagado para encender el sistema de control. El indicador de velocidad máxima / perfil se rasgará hacia arriba y hacia abajo
- Desvíe el joystick hacia adelante hasta que el sistema de control emita un pitido.
- Desvíe el joystick en reversa hasta que el sistema de control emita un pitido.
- Suelte el joystick, habrá un pitido largo.
- La silla de ruedas ahora está desbloqueada.

OBSERVACIONES

1. Las luces indicadas sobre el botón 1/O indican el volumen de potencia.

La silla de ruedas se puede cargar cuando la tercera luz verde a la derecha en la caja de control está encendida. Cargue inmediatamente, de lo contrario la batería se dañará y no se podrá cargar.

2. Para que la batería sea más duradera, cargue la batería con frecuencia para que sea suficiente. Si no se usa la silla de ruedas, saque la batería después de que se cargue lo suficiente. Si la silla de ruedas no se utiliza durante mucho tiempo, cargue la batería una vez tres meses.

- 3) La silla de ruedas eléctrica es adecuada para conducir en habitaciones amplias, caminos y carreteras planas alrededor de las residencias. No vaya cerca de los vehículos motorizados, los agujeros profundos y el agua.
- 4) No corra a través de los escalones a menudo para evitar daños en las ruedas delanteras.
- 5) No suba una pendiente larga en caso de que el circuito del motor esté sobrecargado y la potencia se use demasiado rápido o ocurra un accidente si el usuario no puede detener la silla de ruedas a tiempo en medio de la pendiente.
- 6) Las ruedas accesorias se utilizan en caso de que la silla de ruedas se vuelque cuando la pendiente está demasiado inclinada. No los separe.
- 7) Cuando sea necesario detener la silla de ruedas durante la conducción, mueva el joystick del controlador a la posición original y frenará automáticamente. Cuando se detiene la silla de ruedas en la pendiente, puede frenar automáticamente para permanecer en la pendiente.
- 8) Por favor, compruebe si el aire en los televisores de las ruedas delanteras y traseras es suficiente antes de su uso. Si no es suficiente, infle los neumáticos a tiempo. La presión del aire debe ser de 3kgf/cm²-4kgf/cm².
- 9) Compruebe si los conectores se conectan bien entre sí, las tuercas esparcidas están sueltas. Ajústalos a tiempo.
- 10) Si necesita plegar la silla de ruedas, saque los conectores eléctricos y la caja de la batería y tire hacia arriba del centro de la tapicería para plegarla.
- 11) Si necesito desmontar el controlador, sacar los conectores del controlador con los motores y las baterías, soltar la perilla de ajuste y luego el controlador se puede sacar de la cubierta.
- 12) El paciente pesado y las enfermedades mentales son inadecuados para usar la silla de ruedas eléctrica.
- 13) Debido a que el respaldo puede recuperarse automáticamente a la posición original, si no hay nadie en la silla de ruedas debajo de la posición acostada, no tire de la palanca de ajuste del respaldo.
- 14) ¡No intente conducir cuando esté de pie con la silla de ruedas!

Mantenimiento

1. Limpie cada parte de la silla de ruedas con frecuencia

Guía de autoayuda

Si se produce un disparo del sistema, puede averiguar qué ha sucedido contando el número de barras en el medidor de la batería que están parpadeando.

A continuación se muestra una lista de acciones de autoayuda. Intente usar esta lista antes de ponerse en contacto con su agente de servicio. Vaya al número de la lista que coincida con el número de barras parpadeantes y siga las instrucciones.

Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones descritas anteriormente, póngase en contacto con su agente de servicio.

Número de barras intermitentes	GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1	La batería necesita cargarse o hay una mala conexión a la batería. Compruebe las conexiones a la batería. Si las conexiones son buenas, intente cargar la batería.
2	El motor izquierdo tiene una mala conexión. Compruebe las conexiones al motor izquierdo.
3	El motor izquierdo tiene un cortocircuito a una conexión de batería. Póngase en contacto con su agente de servicio.
4	El motor derecho tiene una mala conexión. Compruebe las conexiones al módulo de la derecha.
5	El motor derecho tiene un cortocircuito a una conexión de batería. Póngase en contacto con su agente de servicio.
6	Una señal externa impide que la silla de ruedas conduzca. La causa exacta dependerá del tipo de silla de ruedas que tengas, una posibilidad es que el cargador de batería esté conectado
7	Se indica un fallo del joystick. Asegúrese de que el joystick esté en la posición central antes de encender el sistema de control.
8	Se indica un fallo del sistema de control. Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras.
9	Los frenos de estacionamiento tienen una mala conexión. Compruebe el freno de estacionamiento y las conexiones del motor Asegúrese de que las conexiones del sistema de control sean seguras.
10	Se ha aplicado un voltaje excesivo al sistema de control. Esto generalmente es causado por una mala conexión de la batería. Compruebe las conexiones de la batería.
7+S	Se indica un fallo de comunicación. Asegúrese de que el cable del joystick esté bien conectado y no dañado.

TÚ Y NOSOTROS
AMAMOS LA VIDA



MedicalTec

